



Gebrauchsanweisung | User Manual

Bracket AED 3 for BLS Bag

P/N: 1042100004

■ INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

EINLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE	1
VERWENDUNGSZWECK	2
LIEFERUMFANG	2
TECHNISCHE DATEN	3
ZUBEHÖR	3
MONTAGE INSTALLATION	4
BEDIENUNG	5
REINIGUNG DESINFEKTION	6
VERWENDETE SYMBOLE	7
ENTSORGUNG	7
SERVICE HERSTELLER	7
WELCOME SAFETY INSTRUCTIONS	9
APPLICATION	10
SCOPE OF DELIVERY	10
TECHNICAL DATA	11
ACCESSORIES	11
INSTALLATION	12
OPERATION	13
CLEANING DISINFECTION	14
SYMBOLS	15
DISPOSAL	15
SERVICE MANUFACTURER	15

■ EINLEITUNG | SICHERHEITSHINWEISE

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bracket AED 3 for BLS Bag.

In dieser Anweisung finden Sie technische Informationen, Gebrauchs- und Montagehinweise.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Bracket AED 3 for BLS Bag in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anweisung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Befestigung, Montage oder Installation entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Instandsetzung und Wartung am Bracket AED 3 for BLS Bag dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt direkt an den technischen Kundendienst der CRS medical GmbH. Jegliche Veränderungen an der Vorrichtung oder ihrem Zubehör, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkrafttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Überprüfen Sie das Bracket AED 3 for BLS Bag und benutzen Sie es nicht wenn:
 - mechanische Beschädigungen am Schließmechanismus zu erkennen sind
 - mechanische Beschädigungen an der Geräteaufnahme zu erkennen sind

■ VERWENDUNGSZWECK

Die Wandhalterung Bracket AED 3 for BLS Bag ist nur für die sichere Halterung eines ZOLL AED 3™ in Verbindung mit der Standard Tragetasche der Firma ZOLL medical bestimmt. Die Verwendung einer anderen Schutztasche für dieses Gerät ist nicht zugelassen.

Die Halterung darf nur in räumlich geschützten Umgebungen verwendet werden. Dazu gehören massive Wände im Innenraum von Gebäuden und stabile Wände von EMS-Bodenfahrzeugen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Defibrillators.

■ LIEFERUMFANG

1 Bracket AED 3 for BLS Bag (P/N: 1042100004)

1 Gebrauchsanweisung

■ TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3600g
Maße (HxBxT)	351,5x258x183 mm
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

■ ZUBEHÖR

Es ist kein weiteres Zubehör erhältlich.

■ MONTAGE | INSTALLATION

Befestigen Sie das Bracket AED 3 for BLS Bag mit 8 Schrauben M6 gemäß dem Bohrbild.

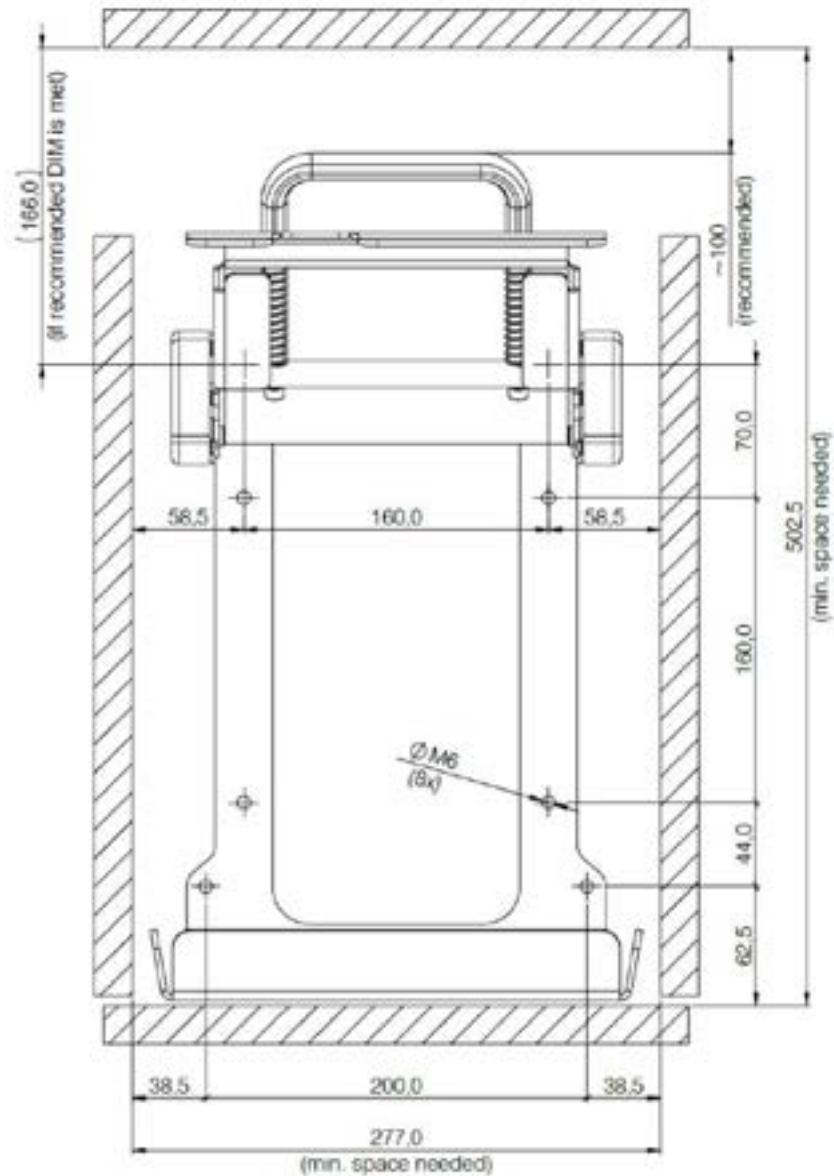

(Alle Angaben in mm)

■ BETRIEBUNG

Öffnen

Entriegeln Sie das Bracket AED 3 for BLS Bag indem Sie den roten Bügelgriff nach vorne ziehen (1) und anschließend nach oben bewegen (2).

Die Verriegelung rastet in der oberen Position ein (3) und das Gerät kann entnommen werden.



Schließen

Achten Sie darauf, dass der ZOLL AED 3™ mit den Gummifüßen der Standard Tragetasche flach an der Rückseite des Bracket AED 3 for BLS Bag anliegt.



Zum Schließen ist keine Entriegelung notwendig. Greifen Sie den roten Bügelgriff und drücken Sie den Deckel nach unten. Am Sichersten verriegelt das Bracket AED 3 for BLS Bag, wenn Sie den Deckel nach Überwindung des Widerstands loslassen und von selbst in Endposition rutschen lassen.

REINIGUNG | DESINFEKTION

Bitte entnehmen Sie den ZOLL AED 3™ zur Reinigung aus der Halterung.

Das Bracket AED 3 for BLS Bag kann mit einem feuchten, fusselreien Tuch und handelsüblichen, milden Kunststoffreinigern gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Reinigungsmittel keine Lösemittel enthält.

Verwenden Sie zum Desinfizieren ebenfalls handelsübliches Desinfektionsmittel.

VERWENDETE SYMBOLE



Siehe Gebrauchsanweisung/Sicherheitshinweise beachten



Referenznummer



Chargennummer



Hersteller

ENTSORGUNG

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes sortenrein.

Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie vom Hersteller.

SERVICE | HERSTELLER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

■ WELCOME | SAFETY INSTRUCTIONS

Welcome

Thank you for purchasing the Bracket AED 3 for BLS Bag.

In this user manual you will find technical information, instructions for use, and mounting directions.

Safety Instructions

- Read and understand the instructions before installing or operating the Bracket AED 3 for BLS Bag.
- Follow all safety instructions and save this user manual in a safe place for future use.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper operation, mounting, or assembly.
- Repair and maintenance of the Bracket AED 3 for BLS Bag can only be performed by authorized personnel. Please consult directly to CRS medical GmbH Technical Support if the device is defective or damaged. Any changes to the device or its accessories which are not performed by CRS medical GmbH will void all product warranties. CRS medical GmbH will not be liable for unauthorized repair or maintenance.
- Check the Bracket AED 3 for BLS Bag and do not use if:
 - there is visible mechanical damage on the locking mechanism
 - there is visible mechanical damage on the holder



■ APPLICATION

The Bracket AED 3 for BLS Bag is intended to be installed in ambulances which use the ZOLL AED 3™ defibrillator in combination with ZOL medical's standard carry case. Using a different protective bag is not allowed.

The holder may only be used in a protected environment. These include massive walls in the interior of buildings and stable walls of EMS ground vehicles.

Please also follow all manufacturer's instructions for the defibrillator.

■ SCOPE OF DELIVERY

1 Bracket AED 3 for BLS Bag (P/N: 1042100004)

1 User Manual



■ TECHNICAL DATA

Weight	3600g
Dimensions (HxWxD)	351,5x258x183 mm
Operating temperature	0°C to +40°C, 5% to 95% Humidity, non-condensing
Storage temperature	-30°C to +70°C, 5% to 95% HR, non-condensing


In the pursuit of product improvement, we reserve the right to make visual and/or technical changes to the product.

■ ACCESSORIES

There are no additional accessories available.

■ INSTALLATION

Install the Bracket AED 3 for BLS Bag with 8 screws size M6 according to the drilling diagram below.

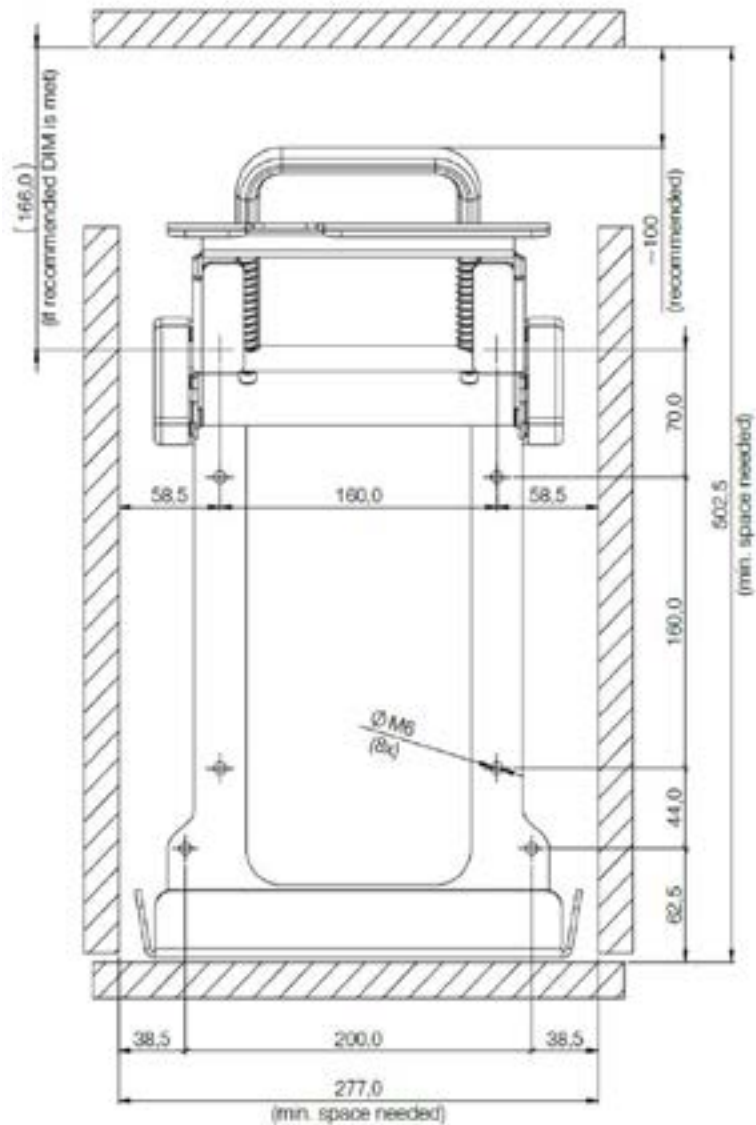

(All measurements are in mm)

■ OPERATION

Opening

Unlock the Bracket AED 3 for BLS Bag by pulling the red handle forward (1) and then move it upwards (2).

The locking device rests in the upper position (3) so the device can be removed.



Closing

Make sure that the ZOLL AED 3™ with the rubber feet of the standard carry case is flat against the back of the Bracket AED 3 for BLS Bag.



To close the Bracket AED 3 for BLS Bag there is no unlocking, simply grab the red handle and pull the cover down. The Bracket AED 3 for BLS Bag locks when the handle is released and then gently pushed down. An audible click should be heard.

■ CLEANING | DISINFECTION

Please remove the ZOLL AED 3™ out of the bracket before cleaning.

The Bracket AED 3 for BLS Bag can be cleaned with a damp, lint-free cloth and commercially available mild plastic cleaners. Please ensure that the cleaner does not contain any solvents.

Commercially available disinfectants can be used for disinfection.

■ SYMBOLS



See user manual/note safety instructions



Reference



Lot number



Manufacturer

■ DISPOSAL

Packing is raw material and therefore recyclable. On behalf of environment protection please dispose the packing sorted. Dispose and recycle all packaging according to your local laws and regulations

For more detailed information regarding environmentally friendly waste disposal please contact the manufacturer.

■ SERVICE | MANUFACTURER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

□ Loherstraße 6
□ D - 35614 Asslar

□ T: +49 6441 38331-0
□ F: +49 6441 38331-29

□ info@crs-medical.com
□ www.crs-medical.com

